



RESTORATIVE & PROSTHETICS

高速气涡轮手机 / 牙科弯手机 / 维护保养

简介



创造超越客户期望的价值

“NSK原名Nakanishi制造,由中西敬一创立,距今已有91年历史。多年来,我们一直锐意进取,不断创新,扩大牙科设备产品系列。我们在全球设有15家办事处,支持135个国家的客户,与客户间有坚固的信任,凭借此,NSK稳固了其在全球旋转牙科仪器市场的知名品牌。NSK,致力于满足牙科医生,技术人员和卫生师的需求。NSK拥有覆盖全球的销售网络和完善的售后服务,支持公司发展策略,不断研发出创新设计、改善产品质量,打造更高价值和业绩。我们力争不断创造价值,超越期望,成为客户必不可少的合作伙伴。”



Create it

NSK致力于与世界各地人们合作通过为客户提供更好产品和服务,追求能创造额外价值的技术创新。改善使用公司器械的患者的生活方式。我们承诺,未来几年,始终与富有创意的合作伙伴合作。

关联
自信
未来
专业
精确
创新
微笑



目录

简介 / 全球网络 / CREATE IT.	P 01
高速气涡轮手机	
Ti-Max Z	P 03 - 04
Ti-Max X450	P 05
S-Max M	P 06
S-Max pico	P 07 - 08
Pana-Max PLUS	P 09
Pana-Max2	P 10
牙科弯手机	
Ti-Max Z	P 11 - 14
Ti-Max X	P 15 - 16
FX Series	P 17 - 18
牙科气动马达	
FX205	P 18
维护保养	
iCare	P 19 - 20
备件	P 21
NSK 快插接口	P 22

Ti-Max Z

高速气涡轮手机系列

功率

我们专注于高速涡轮旋转设备的研发，NSK热衷于创造提供更有价值的新产品。

NSK的产品拥有高精度，可靠性。

NSK的Ti-Max Z系列弯手机和高速气涡轮手机不断追求，使不可能变为可能。

强大耐用的气涡轮手机可保持长时间的舒适性和稳定性

延续净点设计的精密机器，让医生和患者都能感受到舒适性，稳定性和耐用性。这是NSK的技术优势。Z系列轴承设计使用寿命较X系列有所提高。



新三维转子


我们利用新的计算机分析软件开发高输出转子。在长期模拟和试验生产后我们产生一个新的三维曲线。叶片比Ti-Max X气涡轮机大50%。用这个转子，气涡轮机传递最大24 W*的功率。

* Z900KL




DURAGRIP防滑、防刮擦表面处理技术

在使用DURAGRIP表面处理剂之前，我们采用微磨技术对纯钛体表面进行喷砂处理。微磨有助于增加防刮擦能力，有助于形成牢固、可靠的防滑夹紧力。

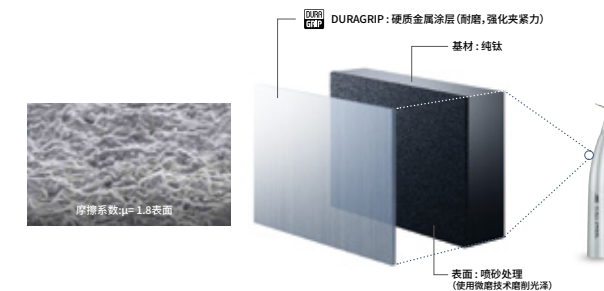

高输出的平稳切割

新的轴承最大输出功率可达24W，这使得在临床操作中能够减少治疗时间，并且帮助医生和患者改善治疗舒适度。

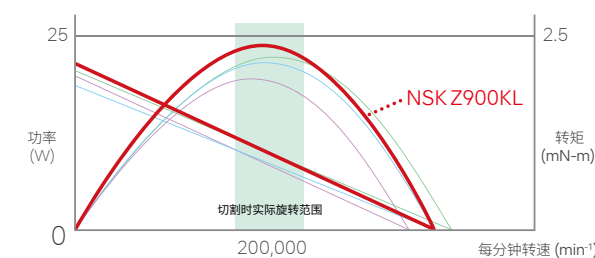

直接连接于 KaVo 接口



带光纤 型号: Z800KL 订货编号: P1112

- 功率: 21 W ● 转速: 360,000-440,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø10.8 × H 12.1 mm ● 纯钛机身和DURAGRIP
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 微型过滤系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体


国械注进20152170795



带光纤 型号: Z900KL 订货编号: P1113

- 功率: 24 W ● 转速: 320,000-400,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø12.5 × H 13.1 mm ● 纯钛机身和DURAGRIP
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 微型过滤系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体

国械注进20152170795

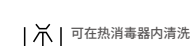


Ti-Max X450

45°角机头适用于智齿阻生牙的分离和拔除

Ti-Max X450系列高速涡轮手机，其特点是45°角机头和细长机身设计因此可在分离和拔除难以抵达的智齿和阻生牙时将大显身手！

强大的治疗部位抵达性能

45°角机头,为您提供宽广的视野和强大的治疗部位抵达性能。适用于覆盖阻生牙和智齿的坚硬组织的切除和分离。

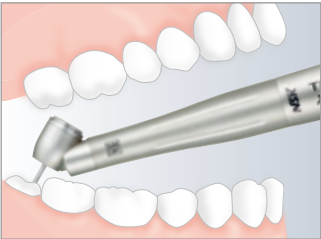

Ti-Max X450为什么能够实现强大的臼齿部位抵达性能和多种手术方式？

右下第8颗阻生牙的拔除



Ti-Max X450

45°角机头和细长机身设计巧妙地扩大了口腔中的操作空间,使视野更宽广,操作更便捷。



高速涡轮手机 (Ti-Max X600)

如果用Ti-Max X600拔除牙齿,在操作时空间会受到限制影响车针切割角度和效果。

NSK接口



国械注进20162174216

带光纤 型号: X450L 订货编号: P1078

- 功率: 21 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø11.2 × H 13.5 mm ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
- 45°角机头 ● 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 三点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 仅适用于25 mm长车针



NSK QD接口



国械注进20162174216

不带光纤 型号: X450QD 订货编号: P1086

- 功率: 16 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø11.2 × H 13.5 mm ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
- 45°角机头 ● 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 三点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 仅适用于25 mm长车针



S-Max M

符合人体工学的纤细设计和出色的切削性能

S-Max M系列气动涡轮手机拥有出色的切削性能,以及符合人体工学设计的纤细机身和清晰的可见度。能够满足牙科医生在操作中的多中要求。S-Max M维护简单,轴芯可轻松替换,帮助您控制成本和减少因故障而无法使用的时间。S-Max M系列的设计实现了对每个细节的追求。

NSK接口



国械注进20142175837

带光纤 型号: M500L 订货编号: P1001

- 功率: 16 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø10.6 × H 12.4 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体



国械注进20142175837

带光纤 型号: M600L 订货编号: P1002

- 功率: 20 W ● 转速: 360,000-430,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø12.1 × H 13.3 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体



直接连接于 KaVo 接口



国械注进20142175837

带光纤 型号: M500KL 订货编号: P1005

- 功率: 16 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø10.6 × H 12.4 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体



国械注进20142175837

带光纤 型号: M600KL 订货编号: P1006

- 功率: 20 W ● 转速: 360,000-430,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø12.1 × H 13.3 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体



四点喷雾



可在热消毒器内清洗



可在最高135°C的高温下进行高温高压灭菌


S-Max pico

创新型高速涡轮手机：迷你机头 纤细机身

NSK S-Max pico系列产品专为微创手术 (M.I.) 设计开发。
迷你机头和纤细机身设计是NSK精密工程的产物：手术部位视野更宽广、手术操作更灵巧。



S-Max pico系列尺寸参数

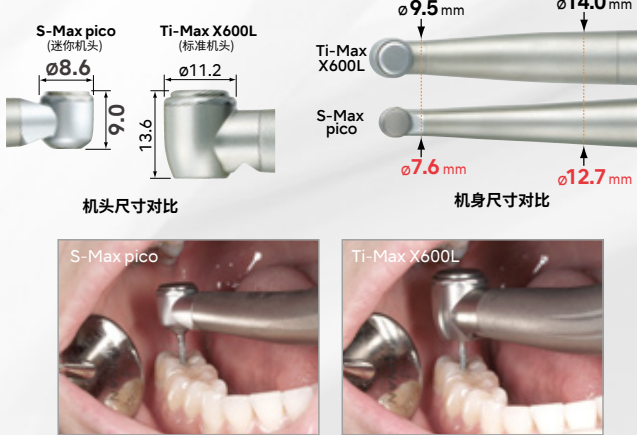

联合显微镜, 提高手术精度



迷你机头提供更宽广的手术操作视野和更强大的手术操作灵活性。改善患者的舒适度。



联合显微技术

NSK接口



国械注进20162550097



带光纤 型号: **S-Max pico** 订货编号: **P1140**

- 功率: 9 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø8.6 × H 9.0 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体 ● 适用于短柄车针 / 超短柄车针 ● 附带车针套装



NSK QD接口



国械注进20162550097



不带光纤 型号: **S-Max pico QD** 订货编号: **P1173**

- 功率: 9 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø8.6 × H 9.0 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体 ● 适用于短柄车针 / 超短柄车针 ● 附带车针套装



直接连接于 KaVo 接口



国械注进20162550097




带光纤 型号: **S-Max pico KL** 订货编号: **P1142**

- 功率: 9 W ● 转速: 380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径: ø8.6 × H 9.0 mm ● 不锈钢机身
- 陶瓷轴承 ● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体 ● 适用于短柄车针 / 超短柄车针 ● 附带车针套装



S-Max pico系列指定用车针

NSK研制开发出pico手机专用的超短柄车针。NSK超短柄车针可与pico手机更好的结合。

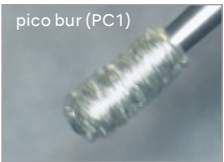

原装高精度车针 (转速: 400,000 转/分)



车针套装 (PC1-6 / 6支/套)

国械注进20162172265

S-Max pico系列指定用车针

型号: PC1 ● 3根/套	订货编号: Y1001817	
型号: PC2 ● 3根/套	订货编号: Y1001818	
型号: PC3 ● 3根/套	订货编号: Y1001819	
型号: PC4 ● 3根/套	订货编号: Y1001820	
型号: PC5 ● 3根/套	订货编号: Y1001821	

型号: PC6 ● 3根/套	订货编号: Y1001822	
型号: PC3ff ● 3根/套 ● 超细车针	订货编号: Y1002019	
型号: PC4ff ● 3根/套 ● 超细车针	订货编号: Y1002020	
型号: PC5ff ● 3根/套 ● 超细车针	订货编号: Y1002021	
型号: PC6ff ● 3根/套 ● 超细车针	订货编号: Y1002022	

可在热消毒器内清洗

可在最高135°C的高温下进行高温高压灭菌


Pana-Max PLUS

高性价比的手机

经过精密设计的Pana-Max PLUS系列告诉手机产品可实现现代也可手术预期要求。
全新Pana-Max PLUS涡轮轴芯，能够增加顺滑度，同时经精密设计的夹持系统，可在扭矩载荷增强条件下牢固固定钻头。
不锈钢机身手感好，角度佳，可增加操作部位的可视范围。


NSK 陶瓷轴承

硬度比不锈钢球形轴承高，同时因重量减轻了一半，可减少磨损，从而提高了机芯的使用寿命。

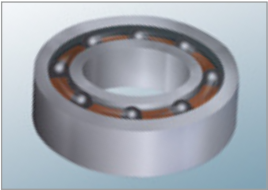

卫生机头系统

NSK的卫生机头系统，该系统内置于涡轮机头内，可防止因停止工作时压力的变化造成血液、病毒等异物通过机头进入手机内。同时因机芯内无异物侵入，大幅度提高了手机轴承的使用寿命。

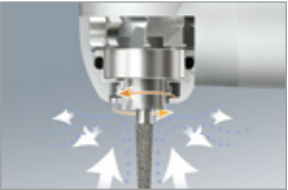

四点喷雾

可从四个角度对治疗部位进行准确的冷却喷雾、使牙齿不受切削时所产生热量的影响，得到保护。





国械注进20142175839

迷你型机头

不带光纤 型号：**PAP-MU M4** 订货编号：**P1021**

● 功率：16 W ● 转速：380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø10.6 × H 12.4 mm ● 不锈钢机身

● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 标准4孔





国械注进20142175839

标准型机头

不带光纤 型号：**PAP-SU M4** 订货编号：**P1022**

● 功率：18 W ● 转速：340,000-410,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø12.1 × H 13.3 mm ● 不锈钢机身

● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 标准4孔





国械注进20142175839

迷你型机头

不带光纤 型号：**PAP-QD MU** 订货编号：**P1015**

● 功率：13 W ● 转速：380,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø10.6 × H 12.4 mm ● 不锈钢机身

● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● NSK QD接口





国械注进20142175839

标准型机头

不带光纤 型号：**PAP-QD SU** 订货编号：**P1016**

● 功率：17 W ● 转速：340,000-410,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø12.1 × H 13.3 mm ● 不锈钢机身

● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 四点喷雾 ● 卫生机头系统 ● NSK QD接口



Pana-Max2

牢固的PANA-MAX系列 艰难临床条件下提供服务的主力军


Pana-Max2在保持使用舒适度的同时，比前几代更加耐用且强大。其先进的设计能够为治疗提供最大限度的操作视野，并且容易深入口腔。

强大的耐用性

Pana-Max2机头有特殊的耐冲击设计，增加耐用性。




我司研发的轴承结构是手机耐用性的关键所在。

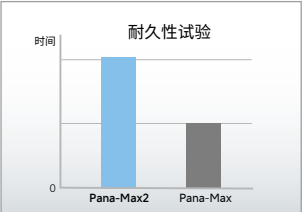

增加动力

由于NSK气动涡轮和模拟技术的结合，Pana-Max2的动力大大超过了它的前身。额定最高20W，为同一系列中功率最高。上述大功率与车针的高速旋转、准确相结合，能快速精确操作。※实验结果图

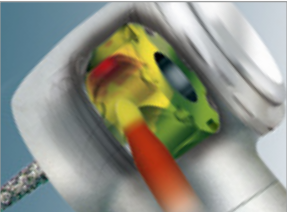



国械注进20152170679

按钮换针式

不带光纤 型号：**Pana-Max2 M4** 订货编号：**P1154**

● 转速：350,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø11.2 × H 13.4 mm ● 不锈钢机身 ● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 标准4孔





国械注进20152170679

扳手换针式

不带光纤 型号：**Pana-Max2 2R M4** 订货编号：**T1029**

● 转速：350,000-450,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø11.2 × H 12.5 mm ● 不锈钢机身 ● 扳手换针式 ● 陶瓷轴承 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 标准4孔





国械注进20152170679

按钮换针式

不带光纤 型号：**Pana-Max2 QD** 订货编号：**P1156**

● 转速：300,000-400,000 min⁻¹ ● 头部直径：ø11.2 × H 13.4 mm ● 不锈钢机身 ● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● NSK QD接口





四点喷雾



可在热消毒器内清洗



可在最高135℃的高温下进行高温高压灭菌

Ti-Max Z

牙科弯手机系列

耐用性

强劲且耐用的手机

结合了世界级的先进技术基础上,NSK研发了强劲耐用的产品。齿轮使用了特殊的碳钻涂层,较以前的齿轮耐磨性增加。且可进行高温高压灭菌,为牙科操作提供更好的可靠性。



Ti-Max Z

防过热系统 (Z95L, Z85L)


NSK的防过热系统, 减少了弯手机在旋转时增加的热量。

精巧的机头

机头角度比X95L大2°, 在操作中视野更清晰, 更能轻松的抵达臼齿的区域。

纤细的颈部

纤细的颈部提供更好的可见性, 让治疗区域的视野更广阔。

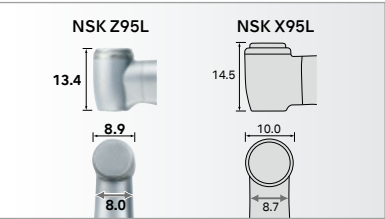


低振动低噪音

微精度零件和齿轮的结合可帮助减少噪音和振动, 更好地为临床医生和患者提供舒适治疗。


微型过滤系统

微型过滤系统的过滤孔道直径为0.3mm, 能够有效地将水中异物阻挡在水路外, 减少以前常见的水路阻塞故障。

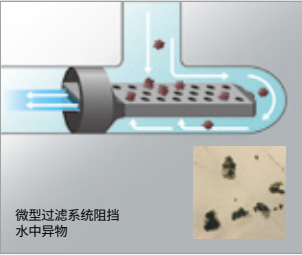

卫生机头系统


NSK的卫生机头系统, 该系统内置于涡轮机头内, 可防止因停止工作时压力地变化造成血液、病毒等异物通过机头进入手机内。同时因机芯内无异物侵入, 帮助提高手机轴承的使用寿命。

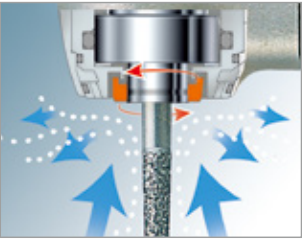

增速 1:5

带光纤 型号: **Z85L** 订货编号: **C1062**

- 最高转速: 200,000 min⁻¹
- FG车针用(ø1.6)
- 纯钛机身和DURAGRIP
- 按钮换针式
- 单点喷雾
- 陶瓷轴承
- 微型过滤系统
- 防过热系统
- 卫生机头系统
- 光导玻璃体
- ★短柄车针

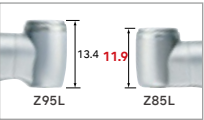

头部尺寸比较
Z85L, 提供强大可视性和可及性。



国械注进20152171502



等速 1:1

带光纤 型号: **Z25L** 订货编号: **C1038**

- 最高转速: 40,000 min⁻¹
- CA车针用(ø2.35)
- 纯钛机身和DURAGRIP
- 按钮换针式
- 单点喷雾
- 微型过滤系统
- 卫生机头系统
- 光导玻璃体



国械注进20152171502



减速 4:1

带光纤 型号: **Z15L** 订货编号: **C1039**

- 最高转速: 10,000 min⁻¹
- CA车针用(ø2.35)
- 纯钛机身和DURAGRIP
- 按钮换针式
- 单点喷雾
- 微型过滤系统
- 卫生机头系统
- 光导玻璃体



国械注进20152171502




增速 1:5

带光纤 型号: **Z95L** 订货编号: **C1034**

- 最高转速: 200,000 min⁻¹
- FG车针用(ø1.6)
- 纯钛机身和DURAGRIP
- 按钮换针式
- 四点喷雾
- 陶瓷轴承
- 微型过滤系统
- 防过热系统
- 卫生机头系统
- 光导玻璃体




国械注进20152171502

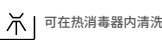

Ti-Max X


NSK 陶瓷轴承

硬度比不锈钢球形轴承高,同时因重量减轻了一半,降低了磨损,从而提高了机芯的使用寿命。
(X95L, X95, X85L, X85)

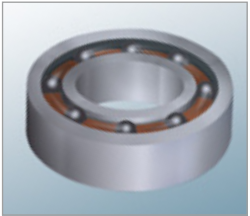

卫生机头系统

NSK的卫生机头系统,该系统内置于涡轮机头内,可防止因停止工作时压力的变化造成血液、病毒等异物通过机头进入手机内。同时因机芯内无异物侵入,大幅度提高了手机轴承的使用寿命。

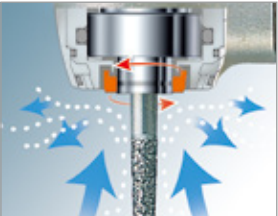

弯手机

增速 1:5

- 带光纤 型号: X95L 订货编号: C600
- 不带光纤 型号: X95 订货编号: C610

● 最高转速: 200,000 min⁻¹ ● FG车针用(ø1.6) ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
● 按钮换针式 ● 陶瓷轴承 ● 四点喷雾 ● 微型过滤系统 ● 防过热系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体(X95L)



国械注进20152170523



增速 1:5

- 带光纤 型号: X85L 订货编号: C604
- 不带光纤 型号: X85 订货编号: C614

● 最高转速: 200,000 min⁻¹ ● FG车针用(ø1.6) ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 陶瓷轴承 ● 微型过滤系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体(X85L) *短柄车针



国械注进20152170523



弯手机

等速 1:1

- 带光纤 型号: X25L 订货编号: C601
- 不带光纤 型号: X25 订货编号: C611

● 最高转速: 40,000 min⁻¹ ● CA车针用(ø2.35) ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 微型过滤系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体(X25L)



国械注进20152170524



减速 4:1

- 带光纤 型号: X15L 订货编号: C602
- 不带光纤 型号: X15 订货编号: C612

● 最高转速: 10,000 min⁻¹ ● CA车针用(ø2.35) ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
● 按钮换针式 ● 单点喷雾 ● 微型过滤系统 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体(X15L)



国械注进20152170524



直手机


等速 1:1

- 带光纤 型号: X65L 订货编号: H273
- 不带光纤 型号: X65 订货编号: H274

● 最高转速: 40,000 min⁻¹ ● 一般低速手机用车针(ø2.35) ● CA车针用(ø2.35) ● 纯钛机身 & DURACOAT 表面处理
● 单点喷雾 ● 卫生机头系统 ● 光导玻璃体(X65L) *需插入随附车针塞



国械注进20182172465

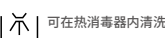

FX series

外水道




基于人体工学设计的一体化手机 性能优良可靠耐用

在全球获得成功后，NSK经典的EX系列手机已升级到FX系列手机。NSK的经典设计技术、可靠性、耐用性和高性价比得以保留。同时FX手机升级成一体化设计，以适应现代化的需求。



可视性改善 :理想的平衡

手机的超细头部和机身设计改善了口腔操作领域的直接和间接可视性。这包括改善了口腔中难以到达区域的可视性。纤细和轻量化的设计为医生提供了舒适的人体工学平衡设计，特别是当与新的NSK FX迷你气动马达一同使用时更是如此。

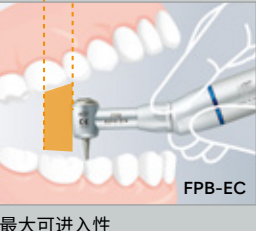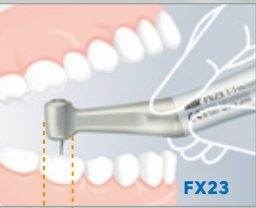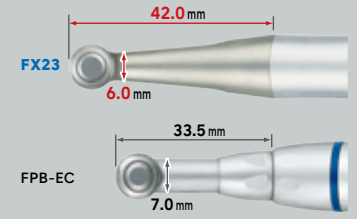

最大可进入性

易更换轴芯

在某些场合，使用随新产品提供的附属工具可以方便地在椅旁更换轴芯，从而减少维修费用，减少由于故障而导致手机无法使用的时间 (FX23)。



按钮换针式

NSK的按钮换针技术让医生按下机头端盖即可装卸车针，无需使用换车针工具。



卫生保养

手机采用无缝隙的一体化机身，确保后续清洁过程简便迅速，使卫生保养更上一层楼。



牙科弯手机

等速 1:1

不带光纤 型号: **FX23** 订货编号: **C1056002**
● 最高转速: 30,000 min⁻¹ ● CA车针用(ø2.35) ● 按钮换针式



国械注进20152170529

135°C

等速 1:1

不带光纤 型号: **FX22** 订货编号: **C1129**
● 最高转速: 30,000 min⁻¹ CA车针用(ø2.35) ● 卡簧式



国械注进20152170529

135°C

直手机

等速 1:1

不带光纤 型号: **FX65** 订货编号: **H1014002**
● 最高转速: 40,000 min⁻¹ ● HP车针用(ø2.35) ● 卫生机头系统



国械注进20142175106

135°C

FX205

外水道

牙科气动马达

不带光纤 型号: **FX205 M4** 订货编号: **M1005002**
● 标准4孔 ● 最大转速为: 22,000 min⁻¹ ±10% (顺时针)



国械注进20152170532

135°C

可在最高135°C的高温下进行高温高压灭菌

iCare

自动清洁和润滑

iCare是一种手机维护系统。拥有时尚轻巧的机身，使用简单，功能多样，可以达到清洁和润滑的作用。根据手机型号调整适量的溶液体积，按下按钮就开始维护。在清洁模式下，可以根据实际情况选择清洁时间，以达到全面的维护保养。另外卡盘清洁系统可针对卡盘单独进行清洁保养。并且机身时尚又轻巧，iCare既能节约空间又能与你的工作环境协调一致。

优点

- 根据手机型号调整溶液体积 (高速手机、低速手机)
- 可通过简单操作进行清洁和润滑
- 卡盘清洁系统可针对卡盘单独进行清洁保养
- 清洁选择模式可以去除多余的油
- 集合大油桶 (1.2升) 减少再注负担



根据手机类型调整合适的溶液体积

根据高速和低速手机调整合适的溶液体积，保证按下按钮后精确和润滑。




溶液槽

iCare大清液槽可以容纳1.2升，允许一次放入一个1升的维护溶液瓶，减少频繁再装。封闭式喷嘴清洁，而且容易再替换。



高速手机

iCare精心清洁高速手机。

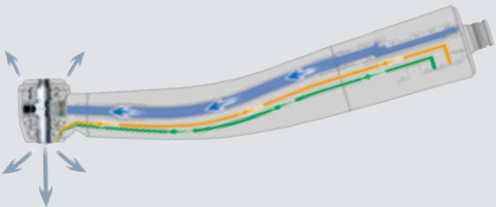

低速手机

低速手机和轴承系统需要额外的溶液渗入。NSK选择系统保证最佳的油输入到低速手机所有的内部组件。



iCare 标准套

双标准端口 + 双循环端口

型号：iCare C2 Type (230V) 订货编号：Y1002792



配套内容

- iCare 主机
- 卡盘清洗转接口
- 电源线
- HP过滤头
- iCare维护油 (1升)
- 喷雾过滤装置
- 吸油表
- 油瓶喷嘴
- 空气管

规格

- 电源：AC 100-240 V 50/60 Hz
- 尺寸：W 280 × D 240 × H 350 mm
- 空气压力：0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm²)
- 溶液槽容量：1.2 L
- 重量：6.5 kg (C2 Type)
- 4孔型接口
- 需要空气管道 (5.0-6.0 kgf/cm²)

iCare Adaptors

型号	订货编号	
PTL Adaptor	Z257010	● 用于 NSK 高速手机的 PTL-CL-LED 接口
B2/M4 Adaptor	T904	● 用于 标准4孔/标准2孔 高速手机
KV Adaptor	Z257020	● 用于 KaVo 高速手机的 MULTIflex LUX 接口
SR Adaptor	Z257023	● 用于 Sirona 高速手机的 Quick 接口
WH Adaptor	Z257021	● 用于 W&H 高速手机的 Roto Quick 接口
BA Adaptor	Z280022	● 用于 Bien-Air 高速手机的 Unifix 接口
F-Type Adaptor	Z280042	● 用于 ENDO-MATE DT / TC2 的机头

安装其他产品手机请检查经销商的转接口

维护保养用润滑油

型号：iCare用维护保养润滑油 1瓶 订货编号：Z016130

- 1升



备件

Ti-Max Z

型号	产品	订货编号
TiZ-MU03 迷你型用轴芯		Y1002075
TiZ-SU03 标准型用轴芯		Y1002076
PTL O型圈套装 (5只/套)		Y900580

Ti-Max X450

型号	产品	订货编号
TiX45-SU03 标准型用轴芯		Y1001906
PTL O型圈套装 (5只/套)		Y900580

S-Max M

型号	产品	订货编号
SX-MU03 迷你型用轴芯		P1001250
SX-SU03 标准型用轴芯		P1002250

S-Max pico

型号	产品	订货编号
SX-PU03 S-Max pico用轴芯		P1140200
PTL O型圈套装 (5只/套)		Y900580

Pana-Max PLUS

型号	产品	订货编号
SX-MU03 迷你型用轴芯		P1001250
SX-SU03 标准型用轴芯		P1002250

Pana-Max2

型号	产品	订货编号
PAX2-SU03 轴芯		P1190

FX Series

型号	产品	订货编号
FX25-04 FX23用帽盖		C1052500
FX23-03 FX23用轴芯		C1056700

iCare

型号	产品	订货编号
喷雾过滤器装置 12片/套		Y900159
吸油棉 10条		U433135

型号	产品	订货编号
TiZ-MU04 迷你型用机头帽盖		P1051050
TiZ-SU04 标准型用机头帽盖		P1052050

型号	产品	订货编号
TiX45-SU04 标准型用机头帽盖		P1078500

型号	产品	订货编号
PTL O型圈套装 (5只/套)		Y900580
SX-MU04 迷你型用机头帽盖		P1001500

型号	产品	订货编号
SX-PU04 S-Max pico用机头帽盖		P1140500

型号	产品	订货编号
SX-MU04 迷你型用机头帽盖		P1001500
SX-SU04 标准型用机头帽盖		P1002500

型号	产品	订货编号
PAX2-SU04 机头帽盖		P1190050

型号	产品	订货编号
FX注水喷嘴 用于FX23		C1052702
注水喷嘴 用于FX65		H019711

型号	产品	订货编号
空气过滤器		U508352
夹头喷嘴		Z257301

型号	产品	订货编号
TiZ-MU05 迷你型用机头开盖工具		Z265006
TiZ-SU05 标准型用机头开盖工具		Z265007

型号	产品	订货编号
X450用 帽盖扳手		P624765

型号	产品	订货编号
SX-SU04 标准型用机头帽盖		P1002500
SX-SU05 迷你型/标准型用 帽盖扳手		20000535

型号	产品	订货编号
SX-PU05 S-Max pico用帽盖扳手		20002803

型号	产品	订货编号
SX-SU05 迷你型/标准型用 帽盖扳手		20000535

型号	产品	订货编号
PAX2-SU05 机头帽盖扳手		P1190765

型号	产品	订货编号
传动轴用工具 用于FX23		C1052701
外注水管		Z166101

型号	产品	订货编号
HP 过滤头 200条		U1120118

NSK 快插接口

带光纤 型号: PTL-CL-LED 订货编号: P1001600

● 钛金属涂层 ● 内置LED ● 不锈钢机身 ● 逆止阀



带光标准4孔

不带光纤 型号: QD-J M4 订货编号: T334051

● 逆止阀



标准4孔

	NSK (带光纤)	KaVo (带光纤)	标准4孔	NSK QD接口
Ti-Max Z	—	●	—	—
Ti-Max X450	●	—	—	●
S-Max M	●	●	—	—
S-Max pico	●	●	—	●
Pana-Max PLUS	—	—	●	●
Pana-Max2	—	—	●	●
快插接口	 NSK接口 LED	 KaVo LED接口 LED	 标准4孔	 NSK QD接口